



Step 6: Fasten Straps Around Your Arms

Ajuste las correas alrededor de sus brazos

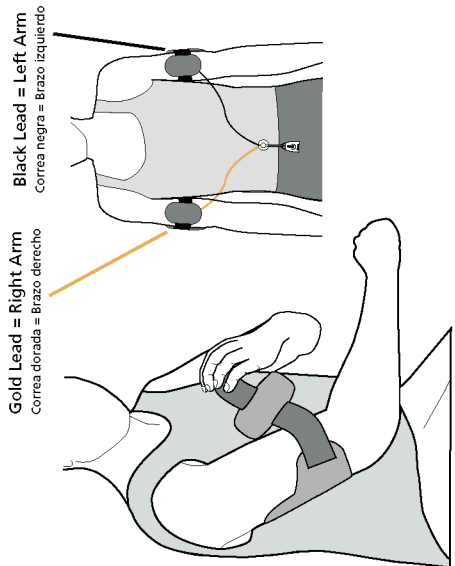


Gold Lead = Right Arm
Correa dorada = Brazo derecho

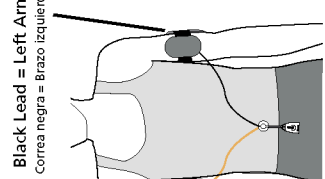

Black Lead = Left Arm
Correa negra = Brazo izquierdo

Step 7: Switch On

Encienda la unidad

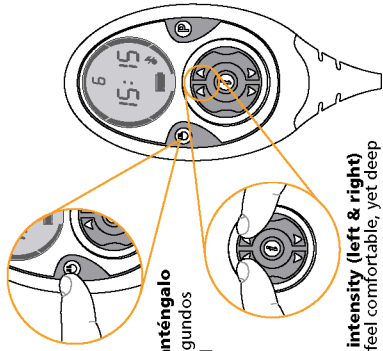

(i) Press and hold for 2 seconds to switch on


Oprima el botón y manténgalo presionado durante 2 segundos para encender la unidad

(ii) Increase intensity (left & right) until you feel comfortable, yet deep contraction

Incremente la intensidad (a la derecha y a la izquierda) hasta que perciba contracciones profundas y a la vez cómodas

Session Over


Fin de la sesión

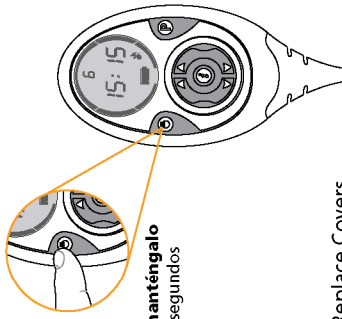

(i) Press and hold for 2 seconds to switch off

Oprima el botón y manténgalo presionado durante 2 segundos para apagar la unidad

Replace Covers
Vuelva a colocar las cubiertas

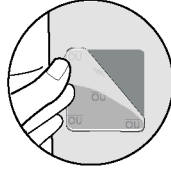

Use 3 times a week to see great results!

¡Utilice el producto 3 veces a la semana y obtendrá magníficos resultados!

SLENDERTONE®

Time to look and feel good

Arm Toner

ENGLISH

Quick Start Guide

ESPAÑOL

Guía de Inicio Rápido

1-800-551-2443

info@slendertoneusa.com

www.slendertone.com

Designed by & Manufactured for:
Bio-Medical Research Ltd., Parkmore Business Park West, Galway, Ireland.
Copyright © 2009, Bio-Medical Research Ltd. All Rights Reserved
Part No. 2490-0403 - Rev. 1 Issue Date: 3/09


Please read the User Manual fully before use.
Lea por completo el Manual para el Usuario antes de utilizar el producto.

Congratulations on purchasing your new Arm Toner from Slendertone!

Your pack contains the following:


¡Felicidades por la adquisición de su nuevo Arm Toner de Slendertone!

El empaque contiene lo siguiente:

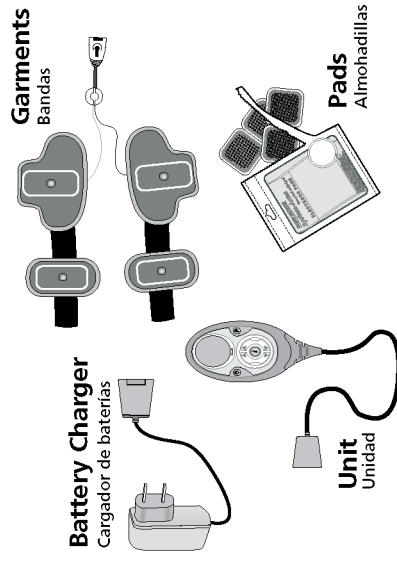


Step 1: Charge Battery (2-3 hours)

Cargue la batería (tomará de 2 a 3 horas)

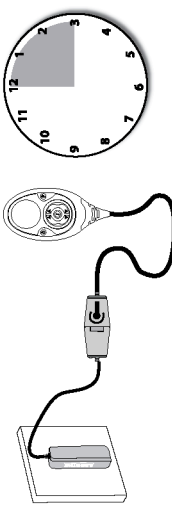


Step 2: Detach Unit

Desprenda la unidad

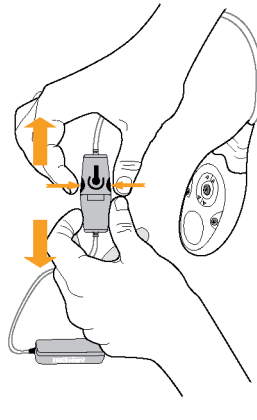


Step 3: Attach Unit

Anexe la unidad

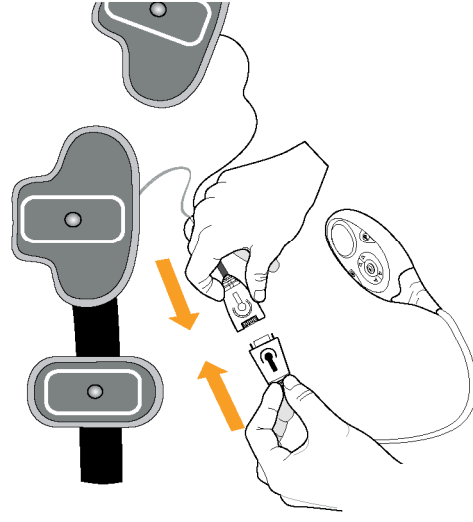


Step 4: Remove Covers... (from grid side)

Retire las cubiertas (del lado de la rejilla)

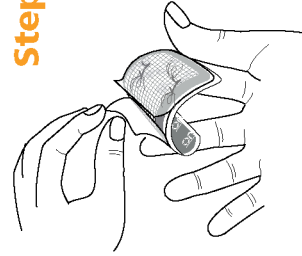

...And Position Pads


... y coloque las almohadillas

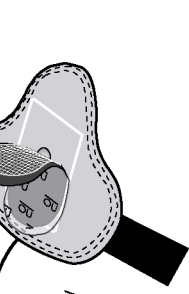

Cover metal studs fully
Cubra por completo los pernos metálicos

Step 5: Remove Covers ... (from black side)

Retire las cubiertas (de la parte negra)

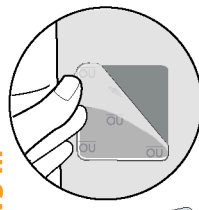

KEEP COVERS!
CONSERVE LAS CUBIERTAS

...And Position Garments

... y colóquese las bandasje los accesorios

