



### 5) Peel Off Liners

Retire los plásticos

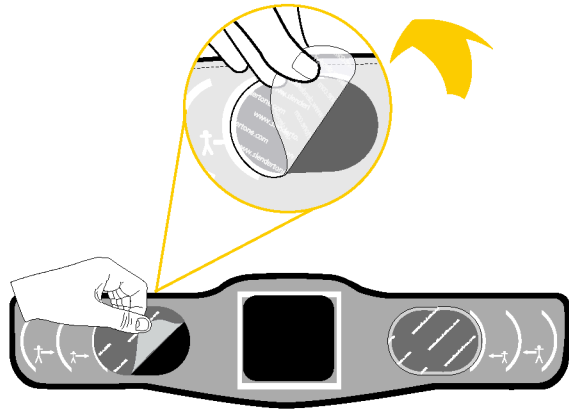


**Keep these**  
Guarde las protecciones

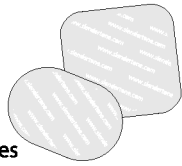


### 6) Position Belt

Colocación del cinturón

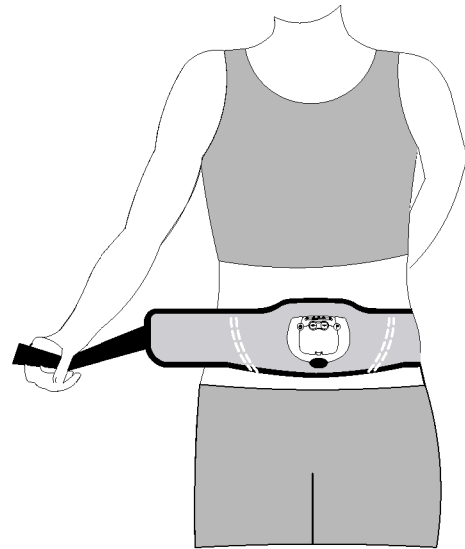

### 7) Power on

Encienda la unidad

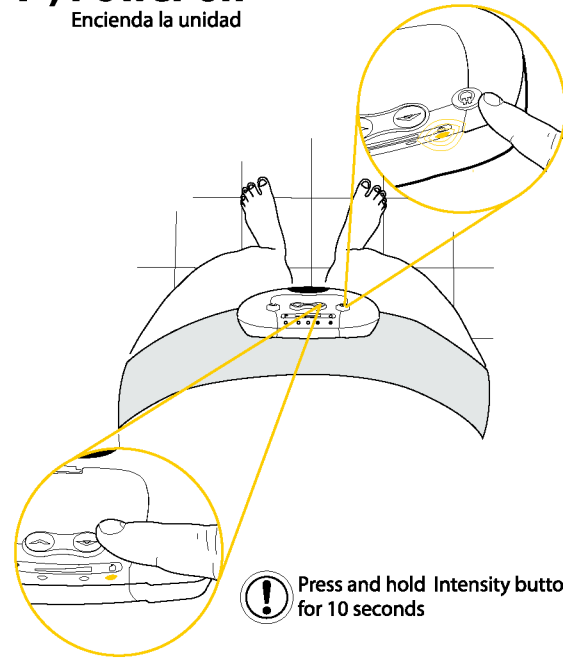


**Press and hold Intensity button for 10 seconds**

Nota: Mantenga pulsado el botón de intensidad durante 10 segundos


### 8) Session over

La sesión ha finalizado

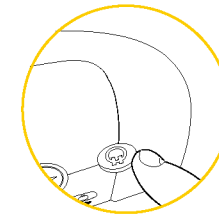

**Power off-Press and hold for 2 seconds to power off**

Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante 2 segundos para apagar la unidad

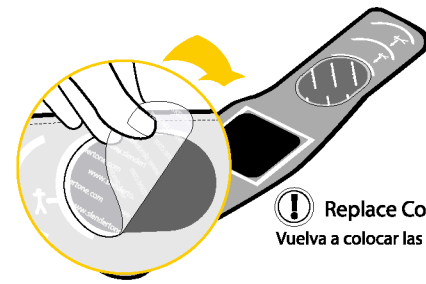

**Replace Covers**  
Vuelva a colocar las protecciones

Still have a question?  
call 1-800-551-2443

# SLENDERTONE<sup>®</sup> FLEX GO!

## Quick start

www.slendertoneusa.com

**1-800-551-2443**

© 2007, Bio-Medical Research Ltd., Parkmore Business Park West, Galway, Ireland.  
Part No.: 2497-9803 Rev 1 Issue date: 0107

**Congratulations on purchasing your new Slendertone FLEX GO!**




**Batteries**  
Baterías

**Unit**  
Unidad



**Pads**  
Electrodos

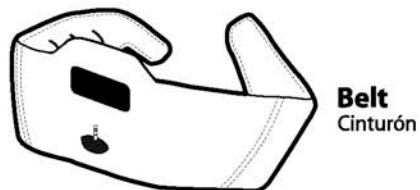


**Belt**  
Cinturón



**Please read User Manual fully before use.**  
Por favor lea el manual


### 1) Insert Batteries

Introduzca las baterías

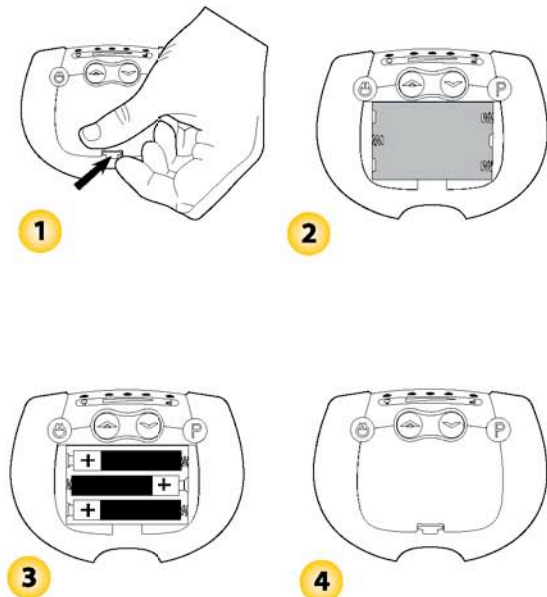

### 2) Attach unit

Introducción de la unidad

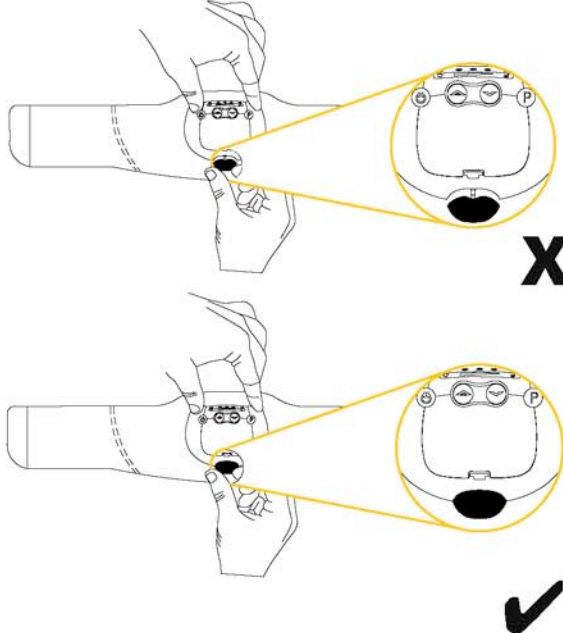


### 3) Peel Off Covers (from grid side)

(from grid side)


Retire las protecciones de las almohadillas (del lado de la cuadrícula)

**Bend Pad to help remove covers**  
Doble las almohadillas para facilitar la retirada de las protecciones

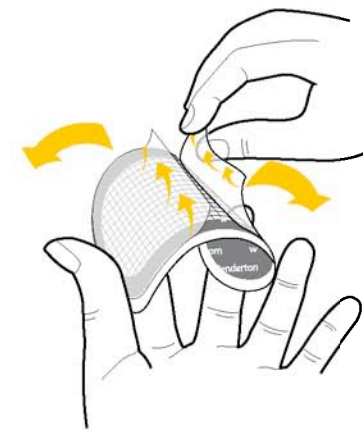

### 4) Position Pads

Colocación de los electrodos

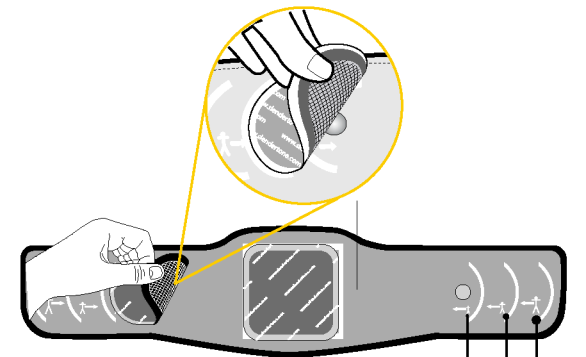

Waist Size

- 24"-30" / 61cm- 76cm
- 30"-38" / 76cm- 98cm
- 38"-47" / 98cm- 119cm

**Cover metal studs fully!**  
Cubrir completamente los conectores metálicos.